

WendyLean est une housse d'oreiller qui comporte une surface de glissement sur la face inférieure, ainsi que des poignées de chaque côté. La surface de glissement facilite la mise en place de l'oreiller. WendyLean est utilisé, d'une part pour remonter la personne plus haut dans le lit puisqu'il glisse facilement sur le support, et d'autre part pour la faire passer en position assise sur le bord du lit à l'aide des poignées.

SystemRoMedic est une série de différents modèles d'auxiliaires de déplacement. Le choix de l'auxiliaire dépend de la situation de déplacement, ainsi que des capacités fonctionnelles et des besoins du patient.



## Contrôle de fonctionnement

### Inspection visuelle

Effectuer des inspections régulières de l'auxiliaire. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou sali. S'il présente des signes d'usure, le produit doit être mis au rebut.



## Toujours lire le mode d'emploi


Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.

Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.





## Contrôle de fonctionnement

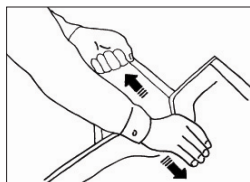



Vérifier à intervalles réguliers que les coutures et les sangles sont intactes et propres. Tester le fonctionnement en exerçant une charge sur le produit et vérifier que celui-ci résiste. Si le produit est endommagé, le mettre au rebut.

## Mise en place

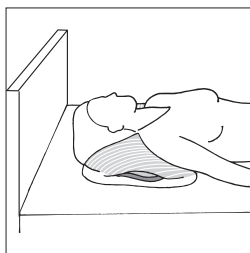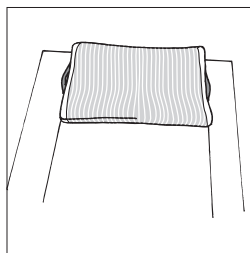

Placer un oreiller dans la housse d'oreiller. La surface lisse doit être placée en dessous dans le lit (1). Pour utiliser les poignées, placer l'oreiller de sorte que les poignées soient en position au-dessus des épaules (2).

## Utilisation

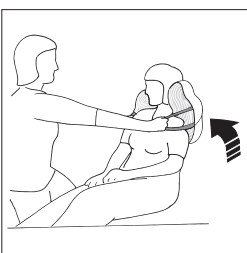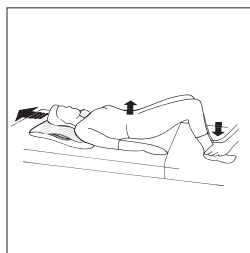

Pour remonter plus haut dans le lit, l'utilisateur doit plier les jambes, soulager les hanches et se repousser (3).

WendyLean peut être utilisé comme un soutien derrière la tête ou les épaules, et pour aider l'assistant quand l'utilisateur veut s'asseoir depuis la position allongée. L'assistant se tient alors aux poignées (4).

## Matériaux:

Polyester, coton, satin

## Conseils d'entretien :

Lire l'étiquette du produit.



Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant. Éviter le passage au sèche-linge pour la plus grande longévité du matériau.

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site [www.handicare.com](http://www.handicare.com) pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla

Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)



handicare